

Anti-Nausea Wristbands

- Drug-free alternative for motion sickness and nausea
- Ideal for air, boat or car travel and roller coasters
- Works by exerting a gentle pressure on the NEI-KUAN acupressure point on each wrist
- Recommended for adults or children over the age of 12 (for more options, please see PS452 Anti-Nausea Wristbands for Children, or users with smaller wrists)
- One size fits most
- Wristbands are made of cotton and spandex, button is made out of polypropylene latex-free

Instructions for Use: For best results, it is recommended to wear a wristband on each wrist before and during the duration of travel. Precise positioning of the wristband may improve results. 1. Place the wristband over the wrists with the plastic button facing the inside of the wrist. 2. Find the acupressure points on each wrist by applying three fingers across the wrist, starting from the crease at the bottom of the hand. 3. Locate the two tendons that run parallel to each other in the wrist with your index finger. The button on the wristband should be centered here. 4. For best results, wristbands should be worn on both wrists. Note: Replace wristbands when it loses elasticity due to wear over time.


Caution: For external use only – use as directed. Anti-nausea wristbands help provide temporary relief of nausea and vomiting only. If nausea and vomiting is frequent and persistent, seek medical attention right away. Individual results may vary. If local skin irritation, pain or swelling occurs, remove wristbands and rinse area with clean water – consult a pharmacist or physician if symptom persists. This product is not a toy. Keep out of reach of children as button may pose as a choking hazard if removed.

Bracelets Anti-Nausée

- Un alternatif sans médicaments pour le mal de transport et la nausée
- Idéal pour le vol, la navigation de plaisance, la conduite, et les montagnes russes
- Fonctionne en exerçant une pression légère sur le point d'acupression NEI KUAN situé sur chaque poignet
- Recommandé pour adultes ou enfants âgés 12 ans et plus (pour des options supplémentaires veuillez voir le produit PS452 bracelets anti-nausée pour enfants, ou pour des utilisateurs avec des poignets trop petits pour la taille adulte)
- Taille unique
- Les bracelets sont fabriqués à partir de coton et de spandex, et le bouton est fabriqué à partir de polypropylène – sans latex

Mode d'emploi : Pour des meilleurs résultats, il est recommandé de porter le bracelet sur chaque poignet avant et pendant tout le voyage. Un positionnement précis du bracelet peut améliorer les résultats. 1. Placer le bracelet sur les poignets avec le bouton en plastique tournée vers l'intérieur du poignet. 2. Trouver les points d'acupuncture sur chaque poignet en appliquant trois doigts à travers chaque poignet, à partir du pli au bas de la main. 3. Localisez avec votre index les deux tendons parallèles du poignet. Le bouton sur le bracelet devrait être centré ici. 4. Pour de meilleurs résultats, les bracelets doivent être portés sur les deux poignets. Note : Remplacer les bracelets quand ils perdent leurs élasticité en raison de l'usure du temps.

Mise en Garde : Pour un usage externe seulement - à utiliser comme indiqué. Les bracelets anti-nauséux permettent seulement de soulager temporairement les nausées et les vomissements. Si les nausées et les vomissements sont fréquents et persistants, consultez immédiatement un médecin. Les résultats individuels peuvent varier. En cas d'irritation cutanée, de douleur ou d'enflure locale, enlever le bracelet et rincer la zone affectée avec de l'eau claire - consulter un pharmacien ou un médecin si les symptômes persistent. Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants car le bouton peut présenter un risque d'étouffement s'il est retiré.

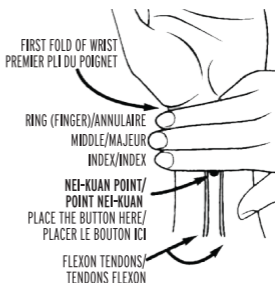

Questions? 1.888.475.2500
www.PharmaSystems.com
Manufactured by / Fabriqué par :
PharmaSystems Inc.
151 Telson Road
Markham, Ontario,
Canada L3R 1E7